



www.deyna.fr

Coussin-Galbé

Coussin polyvalent utilisé pour la prévention d'escarre du siège et le positionnement du patient au fauteuil :

En coussin de siège :

- A** La protubérance vers l'arrière permet de faciliter le lever de la personne (dans le cas de prothèse de hanche)
- B** La protubérance vers l'avant permet de positionner le corps vers l'arrière afin d'éviter le basculement en avant (il convient d'ajuster la hauteur des palettes du fauteuil)



En coussin de dossier :

- C** La protubérance au niveau lombaire : pour le confort et un bon maintien lombaire, redressement du dos par une légère antéversion du bassin.
- D** La protubérance au niveau dorsal : pour un redressement plus important du dos.



Description :

Coussin galbé en mousse HR + visco élastique avec sa housse en polyuréthane imperméable M1.

Références et Dimensions :


Réf : 93.820 : L: 42 cm x l: 44 cm x h: 13 cm

Réf : 92.821 : L: 42 cm x l: 44 cm x h: 9 cm

Réf : 93.830 : L: 50 cm x l: 45 cm x h: 13 cm

Entretien :

Nettoyage de surface à l'eau savonneuse et/ou par un désinfectant sans chlore.
Housse lavable en machine à 90° C

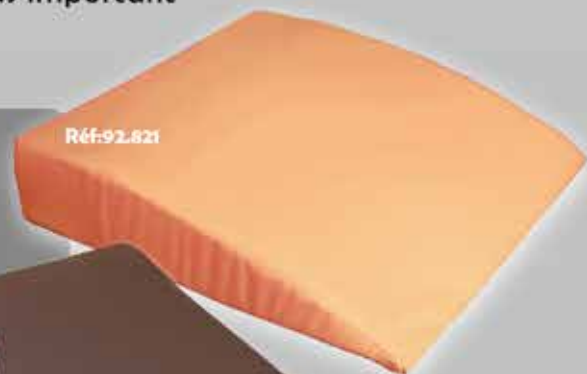

A
DEYNA