

Petit anneau

Gamme DEYNAMED®

Mousse haute résilience et viscoélastique

Description

Conçu pour protéger efficacement les zones sensibles en appui telles que l'oreille, le coude, la face interne du genou, le talon et les malléoles

Zones et positions d'usage

TÊTE	×
DOS	
MEMBRE SUPÉRIEUR	×
BASSIN	
MEMBRE INFÉRIEUR	×
DECHARGE TALONNIÈRE	×
POSITION ALLONGÉE	×
POSITION ASSISE	×

Objectifs thérapeutiques

Limitier les pressions et frottements sur les points d'appui fragiles, améliorer le confort postural et prévenir les douleurs liées aux positions prolongées



classe I




✓ Protection de l'oreille



✓ Protection du coude




✓ Décharge du talon

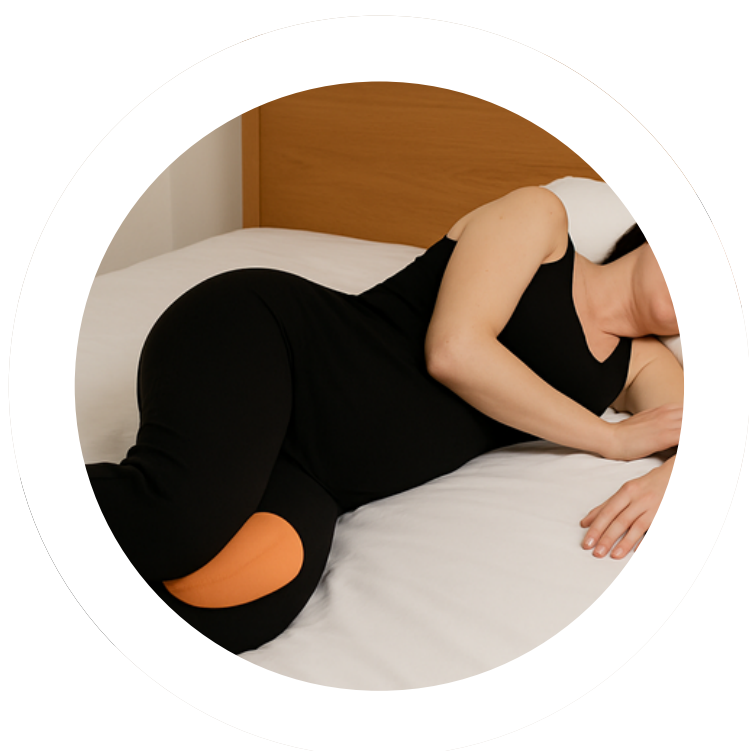

✓ Protection du genou en décubitus latéral



✓ Protection des genoux en fauteuil roulant

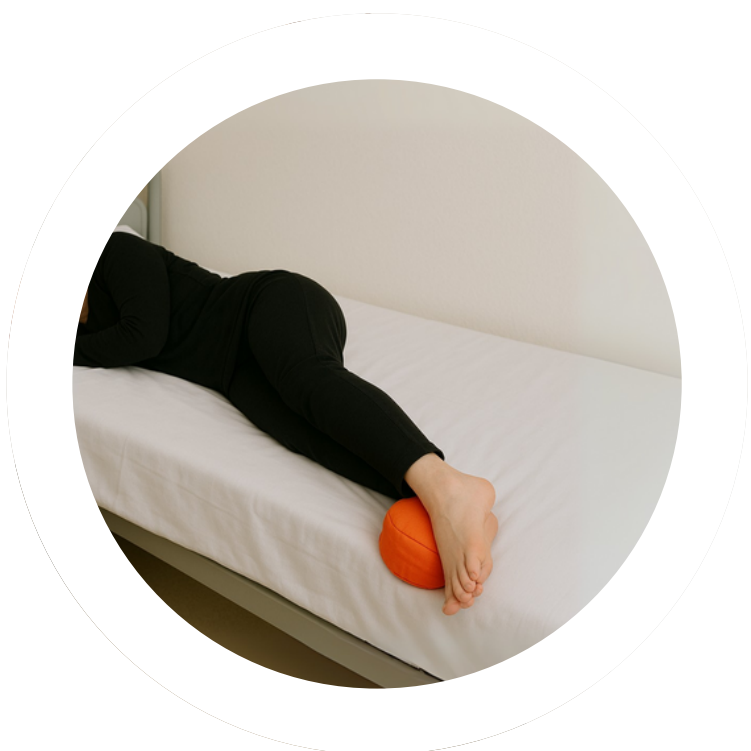

✓ Protection des malléoles

CARACTERISTIQUES



Diamètre: 30 cm



REF : 92484



Housse ignifugée M1



Code LPP : **6284582**



Housse déhoussable et lavable à 90°C



Nettoyage au détergent-désinfectant à pH neutre et sans chlore.



03 65 67 55 35
contact@deyna.fr
www.deyna.fr

Technologie DEYNAMED®

DEYNA utilise différentes mousses afin de répondre à un maximum de besoins utilisateur.

Mousse haute résilience

Mousse ayant la structure alvéolaire la plus ouverte et la plus grande de la gamme. Deyna a choisi ce type de mousse spécifique pour ses qualités de rebond augmentant le confort du patient. Elle a également une grande résilience lui permettant de retrouver sa position initiale et une plus grande durée et stabilité dimensionnelle dans le temps. Ces mousses sont parfaitement adaptées pour un usage demandant du soutien et du confort, comme par exemple dans un fauteuil.

Mousse viscoélastique

Deyna a privilégié l'utilisation d'une mousse viscoélastique pour certains de ses produits essentiellement pour sa souplesse et son confort. C'est une mousse parfaitement adaptée pour la répartition de la pression et donc la prévention des escarres. La respirabilité garantit une diminution de la concentration d'humidité et de chaleur sur des zones précises. De plus, ce type de mousse est compatible pour le positionnement ou la prévention des escarres dans un lit mais également en fauteuil. Le coussin aura une balance parfaite entre maintien de sa forme initiale et adaptation au corps du patient.

DEYNAMED®	Mousse HR	Mousse viscoelastique
Confort	X	X
Fermeté	X	
Résilience	X	X
Rebond	X	
Souplesse	X	X
Mémoire de forme		X

Tableau des propriétés des mousses de la gamme DEYNAMED®

Technologie DEYNAmics®

Tissu alliant confort et
technicité

**NORME
M1 (non
inflammable)**

**Housses
garanties
2 ans**

Un tissu adapté au milieu médical

Les housses DEYNAmics sont déhoussables permettant une hygiène parfaite adaptée au milieu hospitalier. Elles sont lavables en machine à 90°C ou en surface avec un nettoyeur / désinfectant sans chlore. Elles sont également soumises à des tests d'inflammabilité, nos coussins sont donc entièrement ignifugés M1.

Un tissu technique

La housse DEYNAmics 180g/m² en polyester enduction polyuréthane bi-stretch, respirante, imperméable et garantie 2 ans. Elle offre une protection du zip assurant une hygiène interne parfaite du coussin.

DEYNAmics®	Valeur	Bénéfice produit
Poids	180 g/m ²	Bénéfice produit Résistance et souplesse
Résistance Déchirure	55 Newton	Résistance
Imperméabilité avant/après lavage	Identique	Conservation de l'imperméabilité après lavage
Inflammabilité	M1	Non-inflammabilité ainsi que le non dégagement de fumée en cas de feu.
Respirabilité 37°C/65%	400 g/m ² /24h	Bonne respirabilité du tissu

Tableau des propriétés