

☎ 03 65 67 55 35

✉ contact@deyna.fr

🌐 www.deyna.fr



Coussin de dossier

Gamme DEYNAssise®

Mousse viscoélastique

Description

Coussin de dossier à fixation Velcro s'adaptant à tout type de fauteuil pour apporter un soutien dorsal réglable

Zones et positions d'usage


TÊTE	
DOS	×
MEMBRE SUPÉRIEUR	
BASSIN	×
MEMBRE INFÉRIEUR	
DECHARGE TALONNIÈRE	
POSITION ALLONGÉE	
POSITION ASSISE	×

Objectifs thérapeutiques

Améliorer le confort du dos en position assise, répartir les pressions pour diminuer l'inconfort et favoriser une stabilité posturale durable



✓ Soutien dorsal ajustable au fauteuil

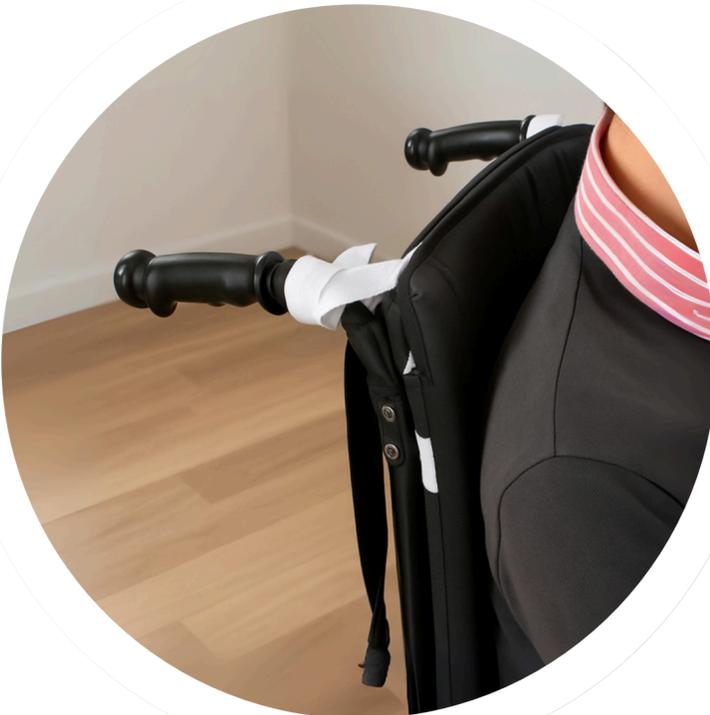

✓ Fixation au fauteuil par bandes velcro

CARACTERISTIQUES

📏 Taille : 54 x 38 x 4 cm

📊 REF : 93617

🔥 Housse ignifugée M1

🧺 Housse déhoussable et lavable à 90°C

🧴 Nettoyage au détergent-désinfectant à pH neutre et sans chlore.



classe 1



☎ 03 65 67 55 35

✉ contact@deyna.fr

🌐 www.deyna.fr

Gamme DEYNAssise®

Deyna a conçu une gamme spécifique au fauteuil roulant pour répondre aux besoins quotidiens de confort et d'adaptation des utilisateurs

Mousse haute résilience

Mousse ayant la structure alvéolaire la plus ouverte et la plus grande de la gamme. Deyna a choisi ce type de mousse spécifique pour ses qualités de rebond augmentant le confort du patient. Elle a également une grande résilience lui permettant de retrouver sa position initiale et une plus grande durée et stabilité dimensionnelle dans le temps. Ces mousses sont parfaitement adaptées pour un usage demandant du soutien et du confort, comme par exemple dans un fauteuil.

Mousse viscoélastique

Mousse à alvéoles ouvertes. Cette mousse a été choisie par Deyna car elle procure un grand maintien et permet une sélection de deux critères répondant parfaitement aux besoins des patients: la stabilité et la fermeté. Cette mousse assure un maintien important de la forme du coussin. Cela permet d'avoir des formes plus techniques et résistantes à plus de pression au quotidien (comme la gouttière par exemple), elle est donc plus adaptée à un rôle de maintien.

Mousse polyéther

Deyna a privilégié l'utilisation d'une mousse viscoélastique pour certains de ses produits essentiellement pour sa souplesse et son confort. C'est une mousse parfaitement adaptée pour la répartition de la pression et donc la prévention des escarres. La respirabilité garantit une diminution de la concentration d'humidité et de chaleur sur des zones précises. De plus, ce type de mousse est compatible pour le positionnement ou la prévention des escarres dans un lit mais également en fauteuil. Le coussin aura une balance parfaite entre maintien de sa forme initiale et adaptation au corps du patient.

DEYNAssise®	Mousse HR	Mousse viscoélastique	Mousse polyéther
Confort	×	×	×
Fermeté	×		×
Résilience	×	×	
Rebond	×		×
Souplesse	×	×	
Mémoire de forme		×	

Tableau des propriétés des mousses de la gamme DEYNAssise®

Technologie DEYNAmics®

Tissu alliant confort et
technicité

**NORME
M1 (non
inflammable)**

**Housses
garanties
2 ans**

Un tissu adapté au milieu médical

Les housses DEYNAmics sont déhoussables permettant une hygiène parfaite adaptée au milieu hospitalier. Elles sont lavables en machine à 90°C ou en surface avec un nettoyeur / désinfectant sans chlore. Elles sont également soumises à des tests d'inflammabilité, nos coussins sont donc entièrement ignifugés M1.

Un tissu technique

La housse DEYNAmics 180g/m² en polyester enduction polyuréthane bi-stretch, respirante, imperméable et garantie 2 ans. Elle offre une protection du zip assurant une hygiène interne parfaite du coussin.

DEYNAmics®

Valeur

Bénéfice produit

Poids

180 g/m²

Bénéfice produit
Résistance et souplesse

Résistance Déchirure

55 Newton

Résistance

Imperméabilité avant/après lavage

Identique

Conservation de
l'imperméabilité après lavage

Inflammabilité

M1

Non-inflammabilité ainsi que le non
dégagement de fumée en cas de feu.

Respirabilité 37°C/65%

400 g/m²/24h

Bonne respirabilité du tissu

Tableau des propriétés